

**rea**<sup>®</sup>

# Clematis<sup>®</sup> Pro



**Der neue Multifunktions-Rollstuhl für die  
moderne Pflege**

Optimale Positionierung | Mühelose Einstellbarkeit | Kompaktes Design



**Yes, you can.<sup>®</sup>**

## Die Evolution der Multifunktions-Rollstühle

Der neue **Rea Clematis Pro** vereint alle Funktionen, die perfekte Pflege benötigt. Wir haben die bewährten Eigenschaften des Vorgängermodells **Rea Clematis** umfangreich erweitert und einen Pflege-Rollstuhl geschaffen, der sowohl die Nutzer als auch das Pflegepersonal begeistern wird. Eine angenehme Sitzposition, überzeugende Stabilität und höchste Sicherheit runden den **Clematis Pro** ab - Herauskommt ein echtes Multifunktions-Talent.

### Gesunde Sitzhaltung mit der modularen Rückenlehne

Durch das modulare Rückensystem lässt sich der **Rea Clematis Pro** schnell und einfach für eine Vielzahl von Anwenderbedürfnissen anpassen. Entweder mit Standard-Rückenbespannung oder optional mit fester Rückenplatte und Laguna2-Rückenkissen. Der Rückenwinkel lässt sich jeweils bis 30° nach hinten neigen.

### DSS® - Dual Stability System

DSS ist eine einzigartige Technologie zur Gewichtsverlagerung, die für eine hervorragende Stabilität des Rollstuhls beim Betätigen der Sitz- und Rückenwinkelverstellung sorgt. Der Sitzwinkel ist um 25° neigbar und wurde so konstruiert, dass Scher- und Reibungskräfte verringert werden. Zusätzlich gewährleistet DSS eine sehr gute Druckverteilung in jeder Sitzposition.

### Neues kompaktes Design

Kompakt ist wichtig, denn das heißt, dass sich der Clematis Pro leicht und wendig auch in engen Räumen fortbewegen lässt. Für einen vereinfachten Eigenantrieb wurden die Hinterräder weiter vorne positioniert, sodass die Greifreifen für den Nutzer besser zugänglich sind.



# 6

## BESONDERHEITEN

### 1 Modulare Rückenlehne

- ▶ Schnell und einfach an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassbar
- ▶ Zwei Rückenausführungen
- ▶ Präzise Anpassung an verschiedene Nutzerpathologien

### 2 Größere Sitzneigung

- ▶ Maximale Sitzneigung von 25°
- ▶ Gewährleistet eine verbesserte Druckverteilung
- ▶ Reduziert die Scherkräfte

### 6 DSS® - Dual Stability System

- ▶ Verbesserte Stabilität in jeder Kipp- und Liegeposition
- ▶ Hoher Drehpunkt zur Minimierung der Scherkräfte

### 3 Einstellbare Sitzplatte

- ▶ Tiefenverstellbar

### 5 Kompakter Rahmen

- ▶ Leicht auf engstem Raum manövrierbar
- ▶ Optimierte für den Innenbereich
- ▶ Kippschutz zur Verbesserung der Sicherheit

### 4 Winkelverstellbare Beinstützen

- ▶ Ermöglicht das bequeme Anheben der Beinstütze in einer gewinkelten Sitz- oder Liegeposition
- ▶ Höhen- und tiefenverstellbares Wadenpolster
- ▶ Höhen-, tiefen-, winkel- und breitenverstellbare Fußplatte für die perfekte Positionierung der Füße



## Zusatzfunktionen

### ▶ Neue Armlehne

- Die neue, konkav geformte Armauflage stellt sicher, dass der Arm während der Kipp- und Liegebewegungen in Position bleibt.
- Leicht zu reinigen für eine bessere Infektionskontrolle

### ▶ Erneuerter Laguna-Rückenpolster

- Verbesserter Komfort und Haltungsverstärkung



## Das optionale Zubehör umfasst:

- Therapietische
- Abduktionskeil
- Hemi-Armauflagen
- Verschiedene Kopf- und Nackenstützen mit Hygienebezügen
- Winkeleinstellbarer Schiebebügel
- Haltegurt
- Seitenpelotten
- Infusionsständer

## Technische Daten ▼

Detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de).  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Sitzbreite ▼



Sitztiefe ▼



Sitzhöhe ▼

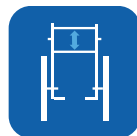

Rückenhöhe ▼



Armlehnenhöhe ▼

**Rea Clematis Pro**

390 - 490 mm<sup>1</sup>

420 - 480 mm

400 - 450 mm

570 - 710 mm

240 - 350 mm



Länge der  
Beinstützen ▼



Sitzwinkel ▼



Rückenwinkel ▼



Gesamtbreite ▼



Gesamthöhe ▼

**Rea Clematis Pro**

355 - 465 mm  
in 10 mm Schritten

0° - 25°

0° - 30°

590 - 725 mm

1200 - 1550 mm<sup>2</sup>



Gesamtlänge inkl.  
Beinstützen ▼



Gesamtgewicht ▼



Max.  
Benutzergewicht ▼



Transportgewicht ▼



Maximale Neigung  
zur Verwendung der  
Feststellbremse ▼

**Rea Clematis Pro**

995 - 1470 mm

ab 30 kg


135 kg

ab 20 kg

7°

1. + weitere 50 mm über die Armlehnen
2. gemessen ohne Kopfstütze

## Rahmenfarbe ▼

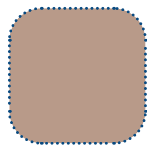

Perlmutterbeige

## Polster ▼



Dartex  
Schwarz

## HMV-Nr.: ▼

18.50.02.7068



Dual Stability System

Rea, Rea Design und DSS (Duales Stabilitätssystem) sind eingetragene Marken von Invacare International.  
Der Rea Clematis Pro wurde mit DSS (Duales Stabilitätssystem) entwickelt. Es bietet dem Nutzer mehr Stabilität und Sicherheit beim Kippen oder Zurücklehnen.

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
**Telefon +49 7562 700-0**  
kontakt@invacare.com  
Web [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
**Telefon +43 6232 553-50**  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
Web [www.invacare.at](http://www.invacare.at)

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
**Telefon +41 61 48770-80**  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
Web [www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)



**Yes, you can.®**



© 2019 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben sind nach besten Wissen zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Absprache zu ändern.  
Rea Clematis Pro - DE - 03/2020 - 1647480