

MyOn^{HC} & MyOn^{HC} Rigid



Unser buntes Leben: Aktiv-Rollstühle
der Invacare MyOn^{HC} Familie

LEICHT | ANPASSBAR | KONFIGURIERBAR



Yes, you can.®

Passt perfekt zu mir

Sie gehören zu den Menschen, die gerne aktiv sind und Wert auf überzeugende Fahreigenschaften Ihres Rollstuhls legen? Das hört sich nach Invacare **MyOn^{HC}** an! Die junge Aktiv-Rollstuhl-Familie umfasst zwei Modelle: eine faltbare und eine starre Variante – mit im Gepäck sind zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.



Nehmen Sie's persönlich

Sie lieben das Leben bunt? Lassen Sie sich inspirieren! Beim **MyOn^{HC}** können Sie die Farben für den Rahmen, die Hinterradaufnahme und die Vorderradgabeln auswählen.

Perfekt konfigurierbar

Den aktiven Look & Feel verleiht der feste Vorderrahmen. Damit wird der komplette Rollstuhl sogar nochmals leichter.

Ob starr oder faltbar: Beide Modelle lassen sich mit festem Vorderrahmen oder wegschwenkbaren Beinstützen ausstatten. Ein kleines, kompaktes Transportmaß erreichen Sie mit der faltbaren Ausführung.

Natürlich erhalten Sie für Ihren **MyOn^{HC}** genau die Zubehörteile, sodass der Rollstuhl wie angegossen sitzt.



Im Handumdrehen genau mein Rollstuhl

Die Idee ist so einmalig, dass wir sie patentieren ließen: Der Winkel der Rückenlehne kann eingestellt werden, während der Nutzer im Rollstuhl sitzt. Die integrierte Skala zeigt den exakten Winkel an.

Und am **MyOn^{HC}** lässt sich noch viel mehr anpassen:

- + Sitztiefe
- + Sitzwinkel
- + Sitzhöhe vorne und hinten
- + Rückenwinkel
- + Höhe der Rückenlehne
- + Unterschenkellänge
- + Armlehnenhöhe



**DIE WICHTIGSTEN
FUNKTIONEN**
AUF EINEN BLICK

MyOn^{HC} Rigid




Besonders leichter Starrrahmen Einmaliges Fahrerlebnis

- Für alle Freunde von Starrrahmen-Rollstühlen gibt es den **MyOn^{HC} Rigid** - mit extra steifem Rahmen für ein direktes, müheloses Fahrerlebnis. Der starre Rahmen überträgt die Kraft ideal auf den Untergrund, sodass sich der Rollstuhl besonders leicht mit geringem Kraftaufwand bewegen lässt.



MyOn^{HC}

Selbst gesichert: innovativer Faltmechanismus

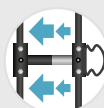

Für volle Stabilität und Sicherheit

PATENTIERT



- ▶ Der patentierte H-förmige, horizontale Faltmechanismus verleiht dem Rollstuhl eine einzigartige Stabilität – ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Faltrollstühlen.

Durch die Selbstsicherung des Faltmechanismus ist die Sitzposition stets stabil und der Antrieb jederzeit kraftsparend.

Einmalig leicht faltbar

Müheloses, kompaktes Design

PATENTIERT



- ▶ Der Faltmechanismus des **MyOn^{HC}** wurde so entwickelt, dass sich der Rollstuhl besonders klein zusammenfallen lässt.

Die Rückenlehne kann einfach auf die Sitzfläche des Rollstuhls abgeklappt werden, sodass er sich in ein sehr kompaktes Paket verwandelt – ideal für die Aufbewahrung oder zum Transport.

1



2



3



4



Die **MyOn^{HC}**-Familie

Die Serie für aktive Rollstuhl-Nutzer Komplettlösung im schönen Design



MyOn^{HC} Rigid

▲ Robuster und leichter Starrrahmenrollstuhl, der auf dem Prinzip eines Kastenrahmens basiert und eine besonders energieeffiziente Fahrperformance bietet.



MyOn^{HC}

▲ Der ideale Rollstuhl mit Faltmechanismus, der eine für Faltrollstühle ungewöhnlich hohe Festigkeit erreicht und sich klein und kompakt zusammenfallen lässt.

Die attraktive Komplettlösung

Die **MyOn^{HC}**-Familie ist die Antwort für alle, die auf einen individuell konfigurierbaren Rollstuhl setzen.

- ▶ Fester Vorderrahmen oder wegschwenkbare Beinstützen
- ▶ Hohe individuelle Anpassbarkeit
- ▶ Cross-kompatible Ersatz- und Zubehörteile
- ▶ Einfach umrüstbar
- ▶ Kompatibel mit Zuggeräten der Marke **Alber**[®]

Verfügbare Optionen und Zubehör

- ▶ Anpassbare Schwerpunkt- und Radsturzeinstellung
- ▶ Verschiedene wegschwenkbare Beinstützen
- ▶ Verschiedene wegschwenkbare und abnehmbare Armlehnen
- ▶ Vielzahl an Schiebegriffen
- ▶ Anti-Kipp: verhindert ein Kippen nach hinten
- ▶ Große Auswahl an Vorderrädern
- ▶ Leichtgewichtiger Radspritzschutz in Carbon-Optik

Technische Daten ▼

Detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf www.invacare.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

						
Sitzbreite ▼	Sitztiefe ▼	Sitzwinkel ▼	Sitzhöhe ▼	Rückenlehnenwinkel ▼	Rückenlehnenhöhe ▼	Rahmen-/Beinstützenwinkel ▼
305 / 330 / 355 / 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 530 mm	350 / 375 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm	0 - 9 °	Vorn: 360-535 mm in 25 mm Schritten Hinten: 360-510 mm in 25 mm Schritten	Fest 90° oder stufenlos 90° -15°/+15° einstellbar	Fest 300 / 325 / 350 / 400 / 425 / 450 / 475 / 500 mm Einstellbar 360-400 und 410-490 mm	Fest 80° Wegschwenkbar 70° / 80° / 90° Winkel einstellbar 0-80°
						
Länge der Fußstützen ▼	Armlehnenhöhe ▼	Gesamtbreite ▼	Gesamtbreite gefaltet ▼	Gesamtlänge inkl. Beinstützen ▼	Gesamtlänge ohne Beinstützen ▼	Gesamthöhe ▼
Wegschwenkbare Beinstützen: 200-565 mm Fester Vorderrahmen: 300-530 mm	150-265 mm 205-280 mm 250-375 mm	SB +180 mm bis SB +250 mm	MyOn ^{HC} : 320-380 mm MyOn ^{HC} Rigid: 485-780 mm	845-1205 mm	670-860 mm	701-1108 mm
						
Max. sichere Neigung¹ ▼	Wendekreis² ▼	Max. Benutzergewicht ▼	Gesamtgewicht ▼	Transportgewicht ▼	Maße im gefalteten Zustand³ ▼	
7°	1050-1380 mm	100 & 130 kg	MyOn ^{HC} : ab 12,3 kg MyOn ^{HC} Rigid: ab 10,8 kg	MyOn ^{HC} : 8,3 kg MyOn ^{HC} Rigid: 6,8 kg	670-860 mm	

Rahmenfarben ▼



Zusatz-Informationen ▼


1. Stabilitätswerte:
Max. Steigung mit Parkbremse = 7°
Statische Stabilität bergab = 14°-21°
Statische Stabilität bergauf = 9,4°-25,5°
Statische Stabilität seitwärts = 20°-24°

2. Radius
Minimaler Wenderadius = 625 mm
Wendekreis = 1050-1180 mm


3. Maße im gefalteten Zustand (MyOn^{HC})
Höhe gefaltet = 450-720 mm
Tiefe gefaltet = 620-1020 mm
Breite gefaltet = 320-380 mm

HMV-Nr. MyOn^{HC}: 18.50.03.0212
HMV-Nr. MyOn^{HC} Rigid: 18.50.03.5002

Colour-Power-Set ▼

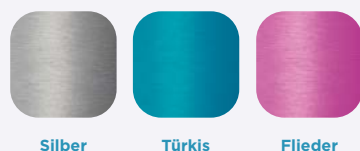

Polsterung ▼

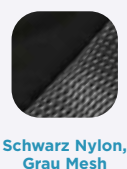

red dot award 2015 winner



Bitte beachten Sie, dass die Originalfarben leicht von der Abbildung abweichen können.

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch

