

# Scorpius-A®

Mobilität zum Mitnehmen

Elektrisch  
faltbar!



Der faltbare Scooter für Ihr vielseitiges Leben

FALTBAR | KOMPAKT | PRAKTISCH



Yes, you can.

Jetzt ist die Suche nach einer Sitzgelegenheit in der Einkaufsmeile vorbei - denn mit dem Scooter *Invacare Scorpius-A* gehen Sie nicht mehr einkaufen, Sie fahren! Und das bequem im Sitzen. Das kleine, zusammenfaltbare Elektromobil ist auch der ideale Begleiter für Ihren nächsten Ausflug: In den Kofferraum gepackt kommt der Scorpius einfach überall hin mit und fährt Sie vor Ort entspannt durch die Gegend.

## 1, 2, 3 - dabei!

## Schnell zusammengefaltet

Dieser schlaue Scooter hat noch ein Ass im Ärmel: Sie können ihn zu einem kompakten Paket zusammenfalten und dann wie einen Reisekoffer einfach hinter sich herziehen - und los geht's!

### Elektrisch zusammenfaltbar

Der *Invacare Scorpius-A* ist mit einem elektrischen Faltmechanismus ausgestattet. Ob auf Knopfdruck oder mit der Fernbedienung, der kleine Scooter faltet sich selbst zusammen und bei Bedarf auch wieder auseinander - und das in weniger als zehn Sekunden.

### Kompakt und leicht

Im zusammengefalteten Zustand ist der handliche Scooter so kompakt, dass er in einen gewöhnlichen Fahrzeugkofferraum passt. Da er ohne Batterie kaum 30 kg wiegt, lässt er sich problemlos verladen. Zudem eignet sich die Faltfunktion perfekt zur Aufbewahrung, da der Scorpius auf diese Weise platzsparend verstaut werden kann.

### Ideal für Flugreisen

Der *Invacare Scorpius-A* kann Sie sogar im Flugzeug und auf Ihren Auslandsreisen begleiten. Sein Lithium-Ionen-Akku mit 11,6 Ah wiegt lediglich 2,8 kg und erfüllt die IATA- und MSDS-Anforderungen zur Mitnahme in Flugzeugen.\*

\*Wir empfehlen dennoch, die Mitnahme des Scooters vor Reiseantritt mit Ihrer Fluggesellschaft abzuklären.



# 5

## HAUPTMERKMALE

1

### Kompakt zusammenfaltbar

- ▶ Müheloses Zusammenfallen für Reisen und zur Aufbewahrung
- ▶ Transportmaße in gefaltetem Zustand: Gesamtlänge nur 775 mm bei einer Gesamtbreite von 512 mm und einer Gesamthöhe von 540 mm

2

### Digital gerüstet

- ▶ Intuitive LED Touchscreen-Technologie
- ▶ Elektrisch zusammenfaltbar in weniger als 10 Sekunden
- ▶ Ausgestattet mit einer Diebstahlsicherung

3

### LED-Beleuchtung

- ▶ LED-Scheinwerfer vorne und hinten
- ▶ Inklusive reaktiver Bremslichter

4

### Flugzeugkonformer Akku

- ▶ Serienmäßig mit für Flugreisen geeigneter Lithium-Ionen-Batterie (11,6 Ah)
- ▶ IATA- und MSDS-konform

5

### Klein, aber oho

- ▶ Dank der pannensicheren 8 Zoll Vorder- und Hinterräder fahren Sie auch auf unwegsamem Untergrund sicher.



## Optionen und Zubehör

### ▶ Gepäcktaschen

Optional sind Gepäcktaschen zur Befestigung vorne, hinten oder unter dem Sitz sowie eine praktische Abdeckplane zur Aufbewahrung erhältlich.







### ▶ Batterie mit 17,4 Ah

Für Personen, die längere Distanzen bis zu 23 km zurücklegen möchten, ist eine stärkere Lithium-Ionen-Batterie erhältlich.









## Technische Daten ▼

Detailliertere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de).  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


						
	Sitzbreite ▼	Sitztiefe ▼	Sitzhöhe ▼	Maße zusammengefaltet (L x B x H) ▼	Gesamtbreite ▼	Gesamtlänge ▼
<b>Scorpius-A</b>	419 mm	340 mm	560 mm	775 x 512 x 540 mm	512 mm	953 mm

						
	Gesamthöhe ▼	Gesamtgewicht (inkl. Batterien) ▼	Gesamtgewicht (ohne Batterie) ▼	Max. Nutzergewicht ▼	Batteriekapazität ▼	Wendekreis ▼
<b>Scorpius-A</b>	953 mm	30,8 kg	28 kg	115 kg	1 x 25,2 V / 11,6 Ah	1140 mm

						
	Max. überwindbare Höhe ▼	Bodenfreiheit ▼	Max. sichere Neigung ▼	Reichweite ▼	Geschwindigkeit ▼	Motorleistung ▼
<b>Scorpius-A</b>	50 mm	43 mm	6°	15 km	6 km/h / 8 km/h <sup>1</sup>	250 W

1. Nur für Österreich und Schweiz

## Verkleidungsfarbe ▼

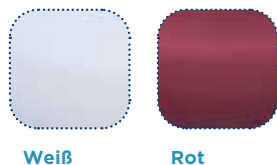

## Polsterung ▼



**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
[kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
[www.invacare.de](http://www.invacare.de)

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
[info-austria@invacare.com](mailto:info-austria@invacare.com)  
[www.invacare.at](http://www.invacare.at)

**Invacare AG**  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
[switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
[www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)



**Yes, you can.®**