

**Küschall®**  
**COMPACT**



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Wir bei Kuschall sind davon überzeugt, dass alles möglich ist, wenn der Wille, es zu erreichen, stark genug ist. Der Kuschall Compact bietet in einem einzigen Produkt Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zugleich. Lass deiner Persönlichkeit und deinen Komfortwünschen freien Lauf - **befreie deine Welt von Grenzen.**

## **KÜSCHALL COMPACT**

Der Kuschall Compact ist höchster Standard für Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität. Er ist entweder mit wegschwenkbaren Beinstützen oder festem Vorderrahmen erhältlich. Der feste Vorderrahmen ist ideal für alle, die besonderen Wert auf eine hohe Steifigkeit des Rahmens und damit eine verbesserte Fahrperformance legen. Legst du mehr Wert auf eine hohe Funktionalität und Anpassbarkeit, dann ist der Kuschall Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen perfekt für dich.

## **ZAUBERWORT: HYDROFORMING**

Stärke, Leichtigkeit und Stabilität. Der hydrogeformte, vordere Rahmen des Kuschall Compact verbessert das Fahrverhalten, indem er die Steifigkeit erhöht. Durch die besondere, kantige und ergonomische Form kannst du dich leichter abstützen und umsetzen. Und das Beste an der neuen Form: Der Rollstuhl sieht einmalig aus! Unglaublich modern, charakteristisch und einzigartig.

## ZEIGT KANTE: DER NEUE VORDERRAHMEN

■ Das Highlight der neuen Kuschall-Serie: der komplett neu konstruierte Vorderrahmen! Du erkennst ihn an seiner charakteristischen kantigen Form, die erst durch Einsatz des Hydroforming-Verfahrens möglich wurde. Der Kuschall Compact wird dadurch sogar noch leichter: Wir konnten das Gewicht um bis zu 500 Gramm reduzieren!

## BEINSTÜTZE

■ Statte deinen Rollstuhl nach deinen Bedürfnissen aus: entweder mit seitlich abschwenkbaren Beinstützen für den einfacheren Transport; oder mit einem festen Vorderrahmen in einem Winkel von 70° oder 80°, um die Steifigkeit zu erhöhen und dadurch die Fahrperformance zu optimieren.

## FUSSAUFLAGEN

■ Ob einteilig oder zweiteilig: Alle Kuschall Fußauflagen sind neu designt und mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet - für einen perfekten Halt.





# Küschall® COMPACT

## EINFACH ZUSAMMENFALTEN

- Mit nur einem einzigen Finger kannst du deinen Küschall Compact zusammenfalten. Beim Entfalten sorgen zusätzliche Führungselemente für eine sichere und stabile Aufnahme des Sitzmoduls.

## KREUZSTREBE

- Der Küschall Compact ist leicht und dabei höchst stabil konstruiert. Die schlanken Rahmenrohre verleihen ihm ein sportlich-leichtes Aussehen. Elegant in die Konstruktion integriert ist die Kreuzstrebe, die die Belastbarkeit nochmals steigert.

## DIE SPUR HALTEN

- Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln ermöglichen eine optimale Ausrichtung der Vorderräder - damit du die Spur exakt halten kannst.

## VORDERRADGABELN

- Das neue und klare Design mit integrierten Lagern ist deutlich weniger anfällig für Schmutz und wartungsfreundlicher.

# HAUPTMERK- MALE

## ZUVERLÄSSIG

Je steifer der Rahmen, desto besser ist die Kraftübertragung beim Antreiben. Im Kuschall Compact sind verschiedene technische Lösungen zur Erhöhung der Steifigkeit integriert, wie z.B. die eigens entwickelte Kreuzstrebe. In Kombination mit einer einteiligen Fußplatte erreichst du eine unschlagbare Fahrperformance für deinen faltbaren Rollstuhl!




## JEDES TEIL DURCHDACHT

Auch auf die Kleinigkeiten kommt es an: Die Beinstützen sind wahlweise mit einem Winkel von 70° oder 80° verfügbar. Ihr äußerst präziser Verriegelungsmechanismus reduziert jegliches Spiel.

## NOCH MEHR KOMFORT

Stimme den Kuschall Compact auf deine Bedürfnisse ab - zum Beispiel kannst du statt der abschwenkbaren Beinstützen einen festen Adduktionsrahmen wählen. Dieser optimiert deine Beinpositionierung und sorgt für besseren Halt auf der Fußplatte. Der Rollstuhl lässt sich noch leichter manövrieren und braucht weniger Platz.

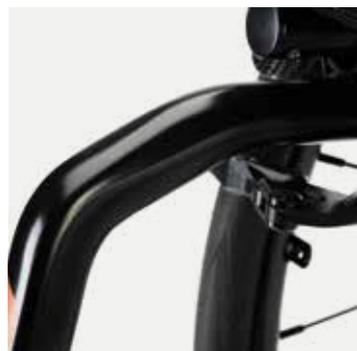


## HYDROFOR- MING MACHT'S LEICHT

Der Rahmen wurde im Hydroforming-Verfahren gefertigt und in allen Einzelheiten modernisiert. Dabei wurde sein Design mit viel Bedacht überarbeitet und eine Gewichtsreduzierung von bis zu 500 Gramm erzielt.

# DEIN COMPACT - DEIN STYLE!

## 1 WÄHLE DEINE RAHMENFARBE

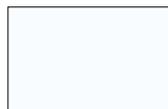

Verkehrsweiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Verkehrsblau



Karminrot

\*weitere Rahmenfarben optional erhältlich

## 2 WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



## 3 WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

# TECHNISCHE DATEN

## SITZBREITE

280 – 500 mm  
in 20 mm Schritten



## SITZTIEFE

320 – 500 mm  
in 20 mm Schritten



## UNTERSCHENKEL- LÄNGE

200 – 510 mm  
in 10 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- HÖHE

300 – 510 mm  
in 15 mm Schritten



## RÜCKENLEHNEN- WINKEL

82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



## SITZHÖHE

vorne: 370 – 530 mm  
hinten: 370 – 500 mm  
in 10 mm Schritten



## RAHMENWINKEL

70° / 80°  
Standard- oder  
Adduktionsrahmen



## GESAMTBREITE

SB + 180 mm



## GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 290 mm



## GESAMTLÄNGE

70°: ca. 870 – 1220 mm  
80°: ca. 850 – 1200 mm



## RADSTURZ

0° / 3°



## GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 9,6 kg  
(fester Vorderrahmen)  
ca. 10,5 kg  
(wegschwenkbare Beinstützen)



## TRANSPORT- GEWICHT

ca. 6,7 kg  
(fester Vorderrahmen)  
ca. 7,8 kg  
(wegschwenkbare Beinstützen)



## MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



## CRASH TEST

Crash getestet gem.  
ISO 7176-19



Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

# K

**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

Invacare GmbH  
Alemannenstraße 10  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at

Invacare AG  
Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
switzerland@invacare.com  
www.invacare.ch

Küschall, Küschall Unlimit your world und Champion sind Marken von Invacare International GmbH. Es wurde alles daran gesetzt, dass sich der Inhalt dieser Veröffentlichung zum Zeitpunkt der Drucklegung auf dem neuesten Stand befindet. Im Rahmen der laufenden Optimierung des Produkts behält sich Invacare International GmbH das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern.

© Juli 2023, Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DE - 1647067