

matrx[®]
SEATING SERIES

Contour Visco^{NG}

Sitzt wie angegossen



Das formschlaue Sitzkissen,
das sich ganz an Sie anpasst


STABIL | SICHER | HYGIENISCH

INVACARE
Yes, you can.[®]

Anatomisch geformt und aus 100% Visco-Formschaum - das sind die Hauptmerkmale des neuen Rollstuhlsitzkissens *Invacare Matrix Contour Visco^{NG}*. Was seine hochelastische Füllung bewirkt, spüren Sie sofort. Der Spezialschaum bietet eine optimale Druckverteilung und gibt dadurch unangenehmen Druckstellen keine Chance. Außerdem lässt Sie dieses Rollstuhlkissen stabil und komfortabel sitzen, es verleiht Halt und stützt Ihr Becken ideal. Bei der Form wurde auf eine niedrige Höhe geachtet, sodass eine Fortbewegung durch Trippeln und das Unterfahren niedriger Tische nach wie vor möglich ist.


Schwungvoll - schlau

- ▶ Der geschwungene hintere Bereich liefert extra Stabilität für das Becken und sorgt für eine korrekte Positionierung.
- ▶ Ein willkommener Lückenfüller: Das abgerundete **Matrix Contour Visco^{NG}** passt unter das Rückenpolster, sodass keine Lücken entstehen.
- ▶ Die Kontaktoberfläche und die Druckverteilung werden maximiert, sodass Haut und Gewebe vor Dekubitus geschützt werden.

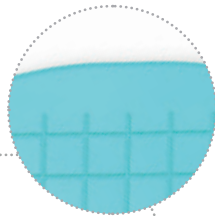

Abgeschrägte Vorderkante

- ▶ Unterstützt die Oberschenkel und lässt Freiraum für die Kniekehlen.
- ▶ Ideal für Menschen mit verkürzter hinterer Oberschenkelmuskulatur: Die Füße können bequem im 90° Winkel und sogar weniger positioniert werden.
- ▶ Ermöglicht zudem eine Trippel-Fortbewegung

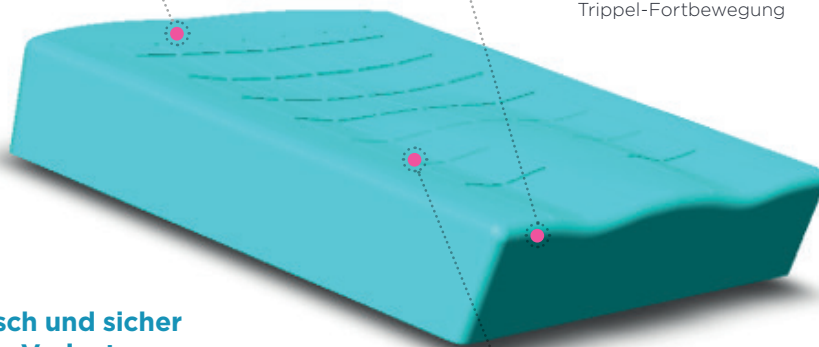

Hygienisch und sicher - in jeder Variante

- ▶ Sehr breite Auswahl an verschiedenen Kissengrößen
- ▶ Anti-Rutsch-Unterseite für sichere Stabilität
- ▶ Mit praktischem Tragegriff
- ▶ Einfach wechseln und waschen: Zwei wasserabweisende Bezüge mit Doppel-Reißverschluss sind inklusive.
- ▶ Bi-elastische Bezüge ermöglichen angenehmes Einsinken in das Kissen

Viskoelastische Eigenschaften

- ▶ Sitzkissen passt sich individuell an Körperform an
- ▶ Dank der vergrößerten Kontaktfläche wird Druck optimal verteilt
- ▶ Verbessert die Sitzposition bei gleichzeitig sehr angenehmen Sitzgefühl
- ▶ Geeignet als Ergänzung zu einem Dekubitus-Behandlungsplan (Stadium I - III) nach klinischem Urteilsvermögen des behandelnden Arztes / Therapeuten

Technische Daten ▼

Detailliertere Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf www.invacare.de. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Breite ▼



Tiefe ▼



Höhe ▼



Gesamtgewicht ▼



Max. Nutzergewicht ▼



Max. Waschtemperatur ▼



**Matrix Contour
Visco^{NG}**

355 / 380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

405 / 430 /
455 / 530 mm

100 mm

ab 1,5 kg

140 kg*

90°

Das Sitzkissen ist nach EN1021-1 Cig und EN1021-2 Match hergestellt.

*Kissen mit Sitzbreite 380 und 405 mm - Mindestnutzergewicht: 40 kg
Kissen mit Sitzbreite 430 mm und mehr - Mindestnutzergewicht: 60 kg

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



Yes, you can.®