


Invacare® **Softform® Fersenkissen**



- Reduziert den Druck auf die Fersen
- Fersen sinken in voneinander unabhängige medizinischen Silikonkissen zur Druckreduzierung
- In einfacher oder doppelter Ausführung erhältlich
- In Kombination mit Keilkissen (siehe Preisliste) ideale Unterschenkelentlastung

Invacare® **L839**

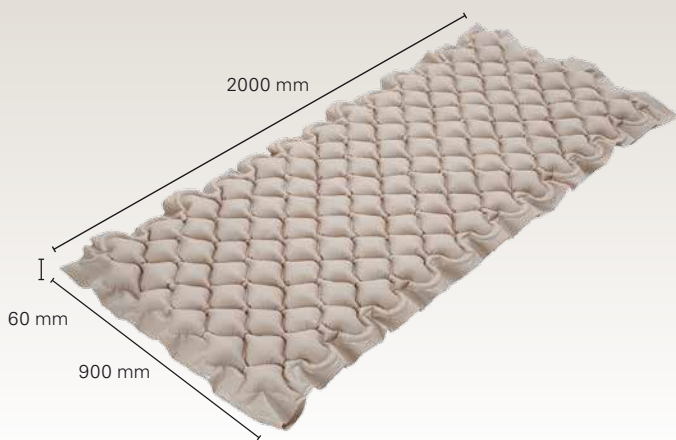

Sicher und sofort einsatzbereit

- Wechseldruckmatratze wird einfach auf die vorhandene Matratze gelegt
- Mit dem Aggregat **L803** werden zwei Luftkreisläufe abwechselnd mit Luft befüllt (Wechsel der Druckzonen alle drei Minuten)
- Blutzirkulation wird gefördert und der Druck auf empfindliche Körperpartien gemindert
- Einfache Reinigung

Invacare® **L803**



- Aggregat für Wechseldruckmatratze
- Leistung (max. 5 l/Min.) kann in mehreren Stufen auf den Nutzer eingestellt werden
- Kann durch zwei integrierte Haken am Bett befestigt werden
- Besonders leise

Technische Daten

Bestellnummern	Invacare® Softform® Fersenkissen	Invacare® L839	Invacare® L803
Wechseldruckmatratze		L839	
Aggregat, einstellbar			L803
Fersenkissen einfach	1471231		
Fersenkissen doppelt	1471232		
Hilfsmittelverzeichnisnummern	11.11.05.0006 (einfach) 11.11.05.0007 (doppelt)		
Weiteres			
Gewicht	Einfach 1,5 kg Doppelt 3,6 kg	2,2 kg	2,0 kg
CE Belastbarkeit		100 kg	–