

Orion[®] Metro



**Die perfekte Mischung für Sie:
mobil, sicher und zuverlässig**



Bleiben Sie mobil und unabhängig! Mit dem Scooter **Orion^{METRO}** kommen Sie schnell und sicher überall hin, zum Beispiel mal eben zum Einkaufen.

Der neue ergonomisch gebaute **Orion^{METRO}** wurde so konzipiert, dass er sowohl neuen als auch erfahrenen Scooter-Fahrern Freude macht. Er ist mit einer Vielzahl an Besonderheiten ausgestattet, aufgrund derer Sie sicher, einfach und mit viel Spaß unterwegs sind.

Der **Orion^{METRO}** ist die perfekte Mischung aus Sicherheit und Zuverlässigkeit!

Kontrolliert und stabil fahren

Genießen Sie eine entspannte Fahrt: Der **Orion^{Metro}** ist mit einem **innovativen Federungssystem** ausgestattet, sodass Sie auch über anspruchsvolleres Gelände angenehm und sicher fahren können. Mit dem kraftvollen Motor und einer Luftbereifung in 11" gleiten Sie sanft über Unebenheiten hinweg.

Sicherheit ist Standard

Der **Orion^{METRO}** ist zusätzlich zur hellen Lichtenanlage mit einer elektronischen **Geschwindigkeitsdrosselung** ausgestattet, die den Scooter in Kurven verlangsamt. So können Sie Ihren Scooter in allen Situationen sicher und bequem manövrieren. Außerdem verfügt der **Orion^{METRO}** über einen **zweistufigen Entriegelungshebel**. Dieser Hebel verhindert ein Fortbewegen des Scooters, wenn dieser sich nicht im Fahrmodus befindet. Diese Eigenschaften, kombiniert mit umfangreichen TÜV-Tests, gewährleisten die hohe Sicherheit des **Orion^{METRO}**.

Hohe Qualität & einfache Wartung

Wir setzen auf Qualität, auch bei den einzelnen Komponenten. Sowohl die Elektronik als auch der Motor des **Orion^{METRO}** verfügen über einen zusätzlichen **Schutz gegen Spritzwasser und Korrosion**, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Die Verkleidung lässt sich sehr **leicht abnehmen**. Dadurch sind der Motor, die Batterien und die Elektronik sehr gut zugänglich.



Ausstattung



Den Lenker einstellen

Die komplette Lenksäule kann einfach verstellt und an die individuelle Körperhaltung angepasst werden.



Ergonomische Lenkgriffe

Die Lenkgriffe wurden für eine natürliche und entspannte Handhaltung entwickelt. Auf Lenkbewegungen reagiert der Scooter sofort.



Bremshebel

Der Scooter kann im Bedarfsfall zusätzlich gebremst werden.



Bremslicht

Das klare und helle Bremslicht ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar.




Entriegelungshebel

Der zweistufige Entriegelungshebel verhindert, dass sich der Scooter selbständig in Bewegung setzt.



Sicherheit in Kurven

Die automatische Geschwindigkeitsdrosselung verlangsamt den Scooter in Kurven.

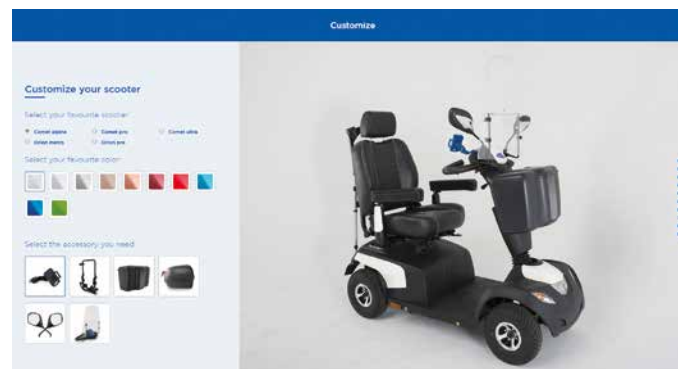

Gestalten Sie Ihren Scooter nach Ihren Wünschen

Sie haben die Auswahl aus 3 Farben und mehr als 25 optionalen Zubehöerteilen. Einfach ausprobieren und Farbvarianten, Sitze und Zubehör kombinieren: mit dem Online Scooter-Konfigurator unter: www.invacarescooter.com.

Zubehör und Optionen für den Scooter



Rückspiegel

Mit einem zusätzlichen Rückspiegel erweitern Sie Ihr Sichtfeld nach hinten.



Windschild

Gegen den Fahrtwind empfehlen wir das praktische Windschild.



Smartphone-Halter

Eine stabile und sichere Halterung, geeignet für die meisten gängigen Smartphones.



USB-Adapter

Perfekt zum Aufladen Ihres Handys oder Tablets - einfach einstecken und los geht's!



Stockhalter

Bewahrt den Gehstock des Fahrers bei der Fahrt.



Halter für Gehhilfen

So sind die Gehilfe oder der Rollator sicher dabei: einfach hinten am Scooter aufhängen und festziehen.



Halter für Sauerstoffflaschen

Die Versorgung mit Sauerstoff ist auch beim Scooter-Fahren gewährleistet: Im eigenen Halter werden die Flaschen sicher mitgeführt.



XL-Korb vorne

Der Extra-Stauraum am Scooter: Der XL-Korb ist dreimal größer als der Standardkorb.

Zubehör und Optionen für den Scooter



Abschließbare Wertsachenbox

Hier bleiben die Wertsachen trocken und sicher verwahrt. Die abschließbare Box ist für vorne und hinten erhältlich.



Großer Korb hinten

Der Korb ist sicher am Rückteil Ihres Scooters angebracht. Er ist ideal für den Transport von Einkaufstaschen.



Faltbarer Getränkehalter

Dosen, Flaschen, Kaffeebecher - im Getränkehalter an der Lenksäule ist das Getränk stets in Griffweite. Wird er nicht gebraucht, einfach einklappen.



Haltegurt mit Schnappverschluss

Der verstellbare Haltegurt hält Sie sicher auf dem Scooter und ist leicht zu öffnen.



Stoßfänger








Die soliden Stoßfänger schützen Ihren Scooter vor Beschädigungen - für vorne und hinten erhältlich.

Weitere Zubehöre und Optionen





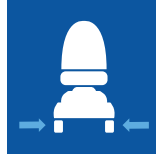


- Große Sitztasche
- Externer Ladeadapter
- Wasser- und schmutzabweisender Sitzbezug
- Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (Standard bei den 10 km/h Modellen)
- Reflektierende Sicherheitsweste
- Regenabdeckung
- 8 Ah Ladegerät

Weitere Informationen zum Scooter-Zubehör unter www.invacarescooter.com.




Technische Daten

Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzhöhe	Rückenlehnenhöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge	Gesamtgewicht (inkl. Batterien)
						
510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	500 mm	660 mm	1270 mm	110 kg

Orion Metro


Gesamtgewicht ohne Batterie	Max. Nutzergewicht	Batteriekapazität	Wendekreis	Überwindbare Bordsteinhöhe	Unterbodenfreiheit	Max. sichere Neigung
						
57 kg	136 kg	2 x 12 V/50 Ah (C20) AGM	2600 mm	80 mm	80 mm	10° (17,6%)

Orion Metro

Reichweite	Geschwindigkeit	Motorleistung
		
43 km	6 / 10 km/h	1. Spitzenleistung 6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 10 km/h: 240 W / 600 W ¹

Orion Metro

Standardfarben

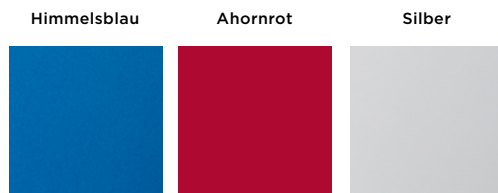

Polsterung



HMV-Nr.: 18.51.05.1035 (6 km/h Version)

Invacare GmbH
Alemannenstraße 10
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
E-Mail
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
E-Mail
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
E-Mail
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



www.invacarescooter.com



© 2019 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor.

Weitere Produktinformationen inklusive Gebrauchsanleitung finden Sie auf der Invacare Internetseite.

Stand 07/2019 - Art.-Nr. 1601663