

# INVACARE TRAGBARE RAMPE

Extra leicht verladen



Yes, you can.®

# INVACARE® TRAGBARE RAMPE

Nehmen Sie Ihr Elektro-Mobil überall hin mit: Mit der tragbaren Rampe verladen Sie Rollstühle und Scooter schnell und einfach in Ihr Auto. In wenigen Handgriffen ist die tragbare Rampe auseinander gefaltet und sofort benutzbar.

Eine Montage ist nicht erforderlich.


Die tragbare Rampe eignet sich überall dort, wo eine fest installierte Rampe fehlt oder nicht möglich ist. Auch größere Stufen überwinden Sie leicht mit der Rampe.

## Überraschend leicht

Die tragbare Rampe wird aus einer einzigartigen Kombination von Carbonfasern und Fiberglas gefertigt. Deshalb ist diese Rampe extrem stabil und gleichzeitig besonders leicht: Mit nur 17 kg kann sie von Hand ausgelegt werden. Am besten haben Sie die Rampe immer im Auto mit dabei!

## Kompakt & tragbar


Die Invacare Tragbare Rampe lässt sich zusammenfallen und so einfach verstauen und transportieren. Abgerundete Ecken und Kanten vermeiden eine Beschädigung des Fahrzeuges beim Transport.

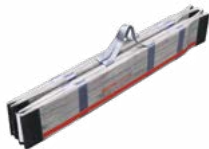

## Extra-stabil

Trotz des geringen Gewichts ist die Rampe extrem stabil und mit bis zu 300 kg (!) belastbar. Sie können die Rampe also zum Verladen sämtlicher gängiger Elektro-Rollstühle oder Scooter benutzen.

## Sicher verladen

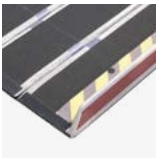

### Schwelle

Die Schwelle an beiden Seiten der Rampe sorgt dafür, dass der Rollstuhl beim Verladen gerade und sicher oben ankommt.




### Kennzeichnung

Das obere Ende der Auflagefläche ist mit der Aufschrift „TOP END“ gekennzeichnet: Diese Seite muss immer oben liegen, dann machen Sie beim Verladen alles richtig.



### Anti-Rutsch-Belag

Der Anti-Rutsch-Belag sorgt für Halt und Grip beim Verladen des Fahrzeuges.

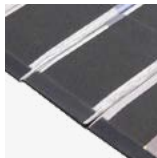

### Sicherheits-Gummiprofil

Die Enden der Rampe sind mit einem Gummiprofil versehen, um ein Wegrutschen zu verhindern und die Auflagepunkte vor Beschädigungen zu schützen.


## So einfach bauen Sie die Rampe auf

Die Rampe besteht aus vier Paneelen, die durch ein patentiertes Scharniersystem miteinander verbunden sind. Dadurch lässt sie sich wie eine Ziehharmonika auseinander- und zusammenfallen.



## Technische Daten

Max. Belastbarkeit	300 kg
Länge	200 cm
Breite	82 cm
Gewicht	17 kg
Max. Hindernishöhe	50 cm
Artikel Nummer	1440530

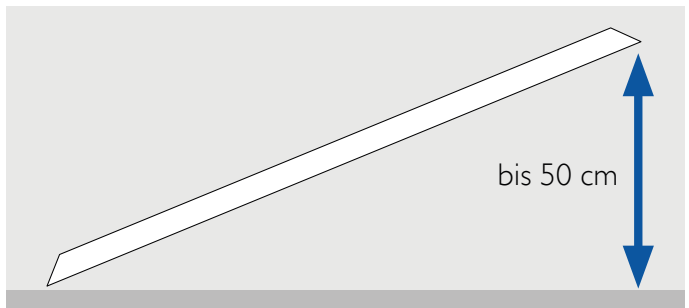

**Invacare GmbH**

Alemannenstraße 10  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
Fax +49 7562 700-66  
E-Mail  
kontakt@invacare.com  
Web www.invacare.de

**Invacare Austria GmbH**

Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
E-Mail  
info-austria@invacare.com  
Web www.invacare.at

**Invacare AG**

Benkenstrasse 260  
4108 Witterswil  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 48770-81  
E-Mail  
switzerland@invacare.com  
Web www.invacare.ch

© 2018 Invacare International Sàrl. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Stand 12/2018 Art.-Nr. 1525953



**Yes, you can.®**